





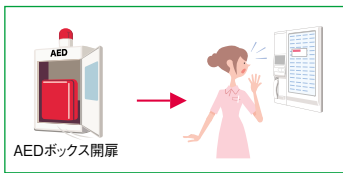
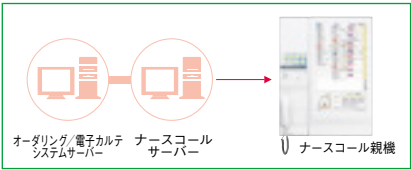



用語	内 容		
<p>情報表示</p>	<p>●<b>呼出履歴</b></p> <p>日時・部屋番号・呼出種別などの履歴が確認できます。</p> 	<p>●<b>録画再生</b></p> <p>見守りカメラやカメラ付玄関子機などの録画映像を再生できます。</p> 	<p>●<b>患者情報登録</b></p> <p>親機のタッチパネル上で、患者さんの氏名などの情報が登録できます。</p> 
<p>各種システム連動</p>	<p>●<b>ドアホン連動</b></p> <p>玄関子機からの呼出を受け、通話ができます。カメラ付玄関子機の場合は、映像も表示されます (Vi-nurseのみ)。</p> 		<p>●<b>センサー (市販品) 連動</b></p> <p>ベッドセンサーやマットセンサーなど、市販品のセンサーが感知すると、ナースコールへ知らせます。</p>
<p>●<b>IPカメラ連動</b></p> <p>病室や共用部に設置したカメラの映像を親機で確認できます。</p> 	<p>●<b>電気錠・オートドア連動</b></p> <p>ドアホンとの通話中、電気錠またはオートドアの解錠操作ができます。</p>	<p>●<b>映像見守りシステム</b></p> <p>病室のカメラでとらえた患者さんの映像を解析。起き上がり・離床を検知してお知らせします。</p> 	
<p>●<b>生体情報モニタ連動</b></p> <p>生体情報モニタのアラーム時は、ナースコールを呼出。ベッド番号のほか、アラーム種別も表示します。</p>	<p>●<b>AED設備連動</b></p> <p>院内のAED収納ボックスの扉が開いたときに知らせます。</p> 	<p>●<b>電子カルテ・オーダー連動</b></p> <p>リアルタイムに患者情報を反映するので転記作業の必要がありません。</p> 	
<p>●<b>オーダーアラート</b></p> <p>医師からのオーダー指示が変更されると、PCナースコール親機でアラート通知します。</p>	<p>●<b>自動火災報知設備連動</b></p> <p>火災発生時、避難の助が必要な担送・護送の患者さんを自動表示します。</p> 		

PCナースコールに関する用語

用語	内 容		
<p>情報表示</p>	<p>●<b>ベーシック表示</b></p> <p>従来のボード型親機と同じイメージで表示。視認性に優れています。</p> 	<p>●<b>アドバンス表示 (ベッド配列表示)</b></p> <p>病室の番号順にベッドボタンを配列。患者情報の詳細表示に対応します。</p> 	<p>●<b>レイアウト表示</b></p> <p>どの場所で呼ばれているか一目で分かります。</p> 