

## 呼出履歴表示

連続して呼出があった際、どの患者さんから呼ばれたかを確認できます。応答端末（応対者）も表示されます。


※表示件数：200件まで



呼出履歴画面

\*当社調べ

**業界初** 呼出履歴に対して対応した処置内容を入力できます。

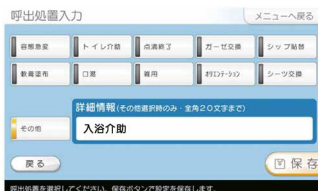

呼出処置入力画面

**業界初** IPカメラやカメラ付玄関子機の映像は、録画・再生ができます。

※自動録画は見守り呼出、オプション1/2呼出時のみ




録画再生画面

## ※業界初 監視履歴表示

ベッドサイドの復旧ボタンの長押しで、見回りの履歴を残せます。親機での確認ができます。

※表示件数：200件まで

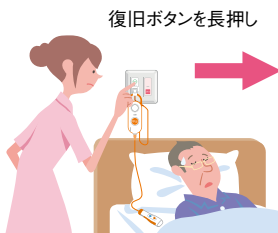

復旧ボタンを長押し




監視履歴画面

\*当社調べ


## ※業界初 ソフトウェアキーボード

親機のタッチパネル画面で、文字入力ができます。患者情報や、処置内容の入力、医師・看護師の登録など、文字情報の入力が必要なときに使います。

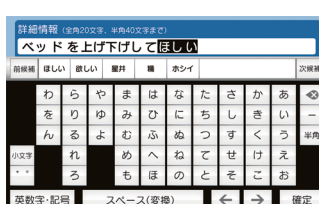

ソフトウェアキーボード画面

\*当社調べ

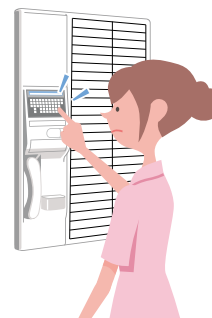

## 患者（入所者）情報管理


選局ボタンや呼出履歴などに、ベッド番号のほか氏名などの情報を表示する場合は、あらかじめ患者情報を登録しておきます。

患者情報は氏名のほかに、救護区分や食事・飲物制限などの詳細情報も入力できます。

**業界初** 登録した患者情報は、液晶表示灯の情報に反映されます。PC親機を導入しなくても液晶表示灯が使用できます。



呼出情報登録画面

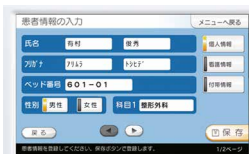


患者情報入力画面（個人情報1/2）




患者情報入力画面（個人情報2/2）



患者情報入力画面（看護情報1/2）

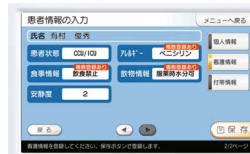

患者情報入力画面（看護情報2/2）

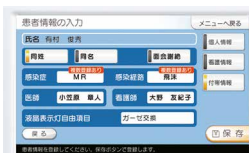

患者情報入力画面（付帯情報）



液晶表示灯（患者情報表示）

\*当社調べ